

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 0056467

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4798

Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : S EDDIKION CHERIFA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- ☐ Réclamation : contact@mupras.com
- ☐ Prise en charge : pec@mupras.com
- ☐ Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/08/23		5	ct	
16/08/23		5	300,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

16/08/23 3607,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

D'Bennis MEHDI
Laboratoire D'ANALYSES MEDICALES
BAN DOENG
1er Rue Mohamed Dourasablanca
Tel: 0522 31 92 60 Fax: 0522 44 50 85
Email: labobandoeng@gmail.com

15/08/2023

B.130+

PC 120

184,20ml

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient

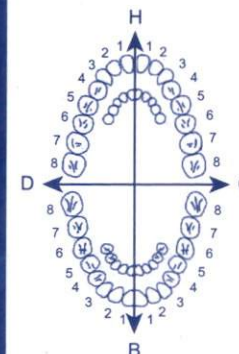

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

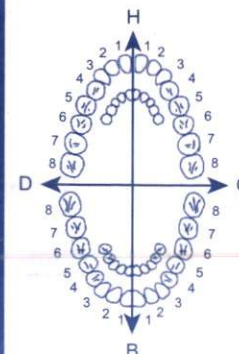

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

BILLET D'ADMISSION

N° admission	 2300732072	379
Nom patient	SEDDIKIOUI CHERIFA	
Médecin	PR. LAIDI SOUKAINA ENDOCRINO	
	Prestations CONSULTATION D'ENDOCRINOLOGIE	
Encaissement	300,00 PAYANT	Visa accueil ASI.SER 15:35



HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

F A C T U R E

N° 114.220 / 2023 du 16/08/2023

Nom patient : SEDDIKIOUI CHERIFA

Entrée 16/08/2023

Prise en charge : PAYANTS

Sortie 16/08/2023

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
CONSULTATION D'ENDOCRINOLOGIE	1,00		300,00	300,00
			Sous-Total	300,00
Total Frais Clinique				300,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

TROIS CENTS DIRHAMS

Total 300,00

Encaissements	Carte Bq	Total encaissé	Solde
	300,00	300,00	0,00



HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

CASABLANCA

Reçu de caisse

N° : 230816153516AS / .

Numéro admission	Nom du patient	Date encaissement
2300732072	SEDDIKIOUI CHERIFA	16/08/2023

Mode paiement	Références du paiement	Montant Dhs
CarteB	013213 Lui-même	300,00
	Total payé	300,00

Reçu établi par :ASI.SER



وصفة طبية Ordonnance

Casablanca, le :

11/08/2023



Mme Cherifa Seddi bioui

1) HbA1c

2) GAT

3)

D'BENNI MEHDI
Laboratoire D'ANALYSES MEDICALES
SAN OENG
11ter Rue Mohamed Diouri Casablanca
Tel 0522 31 92 60 Fax 0522 44 50 85
E mail labubendenni@gmail.com

Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa
Professeur Assistant
Endocrinologie et maladies métaboliques

Dr. BENNIS Mehdi

Pharmacien Biologiste
DES en Biologie Clinique

مختبر التحليلات الطبية
باندونغ
LABORATOIRE
Bandoeng

الدكتور مهدي بنيس

إختصاصي في التحليلات الطبية

*Spécialisé en Biochimie, Hématologie, Immunologie, Bactériologie, Parasitologie
Prélèvement à domicile*

FACTURE N° : 230002089

CASABLANCA le 15-08-2023

Mme SEDDIKIOUI Cherifa

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E10
B119	Hémoglobine glycosylée	B100
B118	Glycémie	B30

Total des B : 130

TOTAL DOSSIER : 184.20 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cent quatre-vingt-quatre dirhams vingt centimes.

D'Bennis MEHDI
Laboratoire D'ANALYSES MEDICALS
BAN DOENG
11 ter Rue Mohamed Diouri Casablanca
Tel: 0522 31 92 60 Fax: 05 22 44 50 85
E mail: labobandoeng@gmail.com

11 ثالثا، محمد الديوري ساحة بوندونغ (أمام رونو درب عمر) محطة طرامواي محمد الديوري - الدار البيضاء

11 ter Rue Mohammed Diouri Place Bandoeng (Face Maison Renault Derb Omar) - Tram Arrêt Mohammed Diouri - Casablanca

Tél. : 05 22 31 92 60 - Fax : 05 22 44 50 85 - Email : labobandoeng@gmail.com

Patente : 32105102 - C.N.S.S. : 2050277 - I.F. : 43301260 - ICE : 001654942000004

N° Compte Bancaire BMCI PAQUET 013 780 01082 00094100110 48

Date du prélèvement : 15-08-2023 à 08:18

Code patient : A230293716

Né(e) le : 27-08-1943 (79 ans)

Mme SEDDIKIOUI Cherifa

Dossier N° : 230815003

Prescripteur :



BIOCHIMIE

Sauf indication contraire, analyses réalisées sur le MINDRAY SAL 6000 (chimiluminescence, spectrophotométrie, néphélométrie ou turbidimétrie)

Glycémie à jeun

1.61 g/L (0.70-1.10)

15-02-2023

1.16

8.94 mmol/L (3.89-6.11)

Consensus :

- Taux normal : de 0,65 à 1,10 g/L
- Diminution de la tolérance au glucose : de 1,10 à 1,26 g/L
- Sujet diabétique : > à 1,26 g/L (sur deux prélèvements distincts)
- Femme enceinte : < ou = 0.92 g/L

Hémoglobine glyquée (HbA1c)

7.10 %

15-02-2023

6.40

(Par HPLC (Chromatographie Liquide de Haute Performance))

Valeurs de référence :

- Sujet normoglycémique : 4,00 à 6,4 % de l'hémoglobine totale
- Sujet diabétique équilibré type 2 : objectif ciblé autour de 6,50 %
- Sujet diabétique équilibré type 1 : objectif ciblé autour de 7 %
- Diabète mal équilibré : taux supérieur à 8,50 %

Validé par : Dr. BENNIS MEHDI

Dr Bennis MEHDI
Laboratoire D'ANALYSES MEDICALES
BAN DONG
Rue Mohamed Diouri Casablanca
3192



وصفة طبية Ordonnance

Casablanca, le : 16/08/23

M. SEDDIKI ou Cherifa,

393,00 x 6

1 - Samaria Aouf.

Ayplant → 6 ms

2 - Lantus

162,50

x 4

408 uE len → 1 ms

99,00 x 3 Batelets l'et shop.

x 3 1,00

360 li → 1 ms

3607,00.

PHARMACIE
DU MARCHÉ CENTRAL
152, Bd Mohammed V
CASABLANCA - Tél: 0522 22 19 48

Hôpital Universitaire International
P. Assistant LADI Soukaina
Endocrinologue Diabétiologue
06 11 25 22 23



مركز النقديات

SANS CONTACT



16/08/23

14:27:13

9900397747

93977401

HOP CHEIKH KHALIFA G1

Casablanca

A00000000031010

APP : VISA

xxxxxxxxxxxxx9806

CARTE NATIONALE

D18F61E851C54901

220-0-9999-1-55

MONTANT: 300,00 MAD

NUM TRANSACTION : 005

NUM AUTORISATION: 249157

STAN : 013213

DEBIT

Le CMI vous remercie

TICKET A CONSERVER
COPIE CLIENT



6739

**100 mg****Januvia®**
comprimés pelliculés
Sitagliptine**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES**

LISTE I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Fabricants :

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Shotton Lane, Cramlington
Northumberland NE23 3JU
Royaume-Uni

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

Merck Sharp & Dohme
166, 168 Bd Zerktouni
Casablanca- Maroc

**JANUVIA® + GROSSESSE
= DANGER****Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique**

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ



6739

**100 mg****Januvia®**
comprimés pelliculés
Sitagliptine**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES**

LISTE I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Fabricants :

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Shotton Lane, Cramlington
Northumberland NE23 3JU
Royaume-Uni

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

Merck Sharp & Dohme
166, 168 Bd Zerktouni
Casablanca- Maroc

**JANUVIA® + GROSSESSE
= DANGER****Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique**

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ



6739

**100 mg****Januvia®**
comprimés pelliculés
Sitagliptine**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES**

LISTE I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Fabricants :

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Shotton Lane, Cramlington
Northumberland NE23 3JU
Royaume-Uni

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

Merck Sharp & Dohme
166, 168 Bd Zerktouni
Casablanca- Maroc

**JANUVIA® + GROSSESSE
= DANGER****Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique**

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ

 **Lantus® SoloStar®**

100 Unités/ml - 100 Units/ml

solution injectable en stylo prérempli
solution for injection in a pre-filled

 **Lantu**

100 Unités/ml

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH

npli

 **Lantus® SoloStar®**

100 Unités/ml - 100 Units/ml

solution injectable en stylo prérempli
solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608



كيفية الإستعمال
Mode d'emploi



كيفية الإستعمال
Mode d'emploi



كيفية الإستعمال
Mode d'emploi

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ

patient

Januvia 100 mg, comprimés pelliculés sitagliptine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Januvia et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de

peut également que votre organisme produise trop de sucre. Dans ce cas, le sucre (glucose) s'accumule dans le sang. Cela peut conduire à des problèmes médicaux graves tels que maladie cardiaque, maladie rénale, cécité et amputation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Januvia ?

Ne prenez jamais Januvia

- si vous êtes allergique à la sitagliptine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Des cas d'inflammation du pancréas (pancréatite) ont été rapportés chez des patients traités par Januvia (voir rubrique 4).

Si vous remarquez des cloques sur la peau, il peut s'agir d'un état appelé pemphigoïde bulleuse. Votre médecin peut vous demander d'arrêter Januvia.

Prévenez votre médecin si vous avez ou avez eu :

- une maladie du pancréas (telle qu'une pancréatite)
- des calculs biliaires, une dépendance à l'alcool ou des taux de triglycérides (une forme de graisse) très élevés dans votre sang. Ces pathologies peuvent augmenter votre risque d'avoir une pancréatite (voir rubrique 4).
- un diabète de type 1
- une acidocétose diabétique (une complication du diabète

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ

patient

Januvia 100 mg, comprimés pelliculés sitagliptine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Januvia et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de

peut également que votre organisme produise trop de sucre. Dans ce cas, le sucre (glucose) s'accumule dans le sang. Cela peut conduire à des problèmes médicaux graves tels que maladie cardiaque, maladie rénale, cécité et amputation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Januvia ?

Ne prenez jamais Januvia

- si vous êtes allergique à la sitagliptine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Des cas d'inflammation du pancréas (pancréatite) ont été rapportés chez des patients traités par Januvia (voir rubrique 4).

Si vous remarquez des cloques sur la peau, il peut s'agir d'un état appelé pemphigoïde bulleuse. Votre médecin peut vous demander d'arrêter Januvia.

Prévenez votre médecin si vous avez ou avez eu :

- une maladie du pancréas (telle qu'une pancréatite)
- des calculs biliaires, une dépendance à l'alcool ou des taux de triglycérides (une forme de graisse) très élevés dans votre sang. Ces pathologies peuvent augmenter votre risque d'avoir une pancréatite (voir rubrique 4).
- un diabète de type 1
- une acidocétose diabétique (une complication du diabète

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ

patient

Januvia 100 mg, comprimés pelliculés sitagliptine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Januvia et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de

peut également que votre organisme produise trop de sucre. Dans ce cas, le sucre (glucose) s'accumule dans le sang. Cela peut conduire à des problèmes médicaux graves tels que maladie cardiaque, maladie rénale, cécité et amputation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Januvia ?

Ne prenez jamais Januvia

- si vous êtes allergique à la sitagliptine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Des cas d'inflammation du pancréas (pancréatite) ont été rapportés chez des patients traités par Januvia (voir rubrique 4).

Si vous remarquez des cloques sur la peau, il peut s'agir d'un état appelé pemphigoïde bulleuse. Votre médecin peut vous demander d'arrêter Januvia.

Prévenez votre médecin si vous avez ou avez eu :

- une maladie du pancréas (telle qu'une pancréatite)
- des calculs biliaires, une dépendance à l'alcool ou des taux de triglycérides (une forme de graisse) très élevés dans votre sang. Ces pathologies peuvent augmenter votre risque d'avoir une pancréatite (voir rubrique 4).
- un diabète de type 1
- une acidocétose diabétique (une complication du diabète



Sitagliptine
comprimés pelliculés

MSD



100 mg

Januvia®

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Fabricants :

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Shotton Lane, Cramlington
Northumberland NE23 3JU
Royaume-Uni

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

Merck Sharp & Dohme
166, 168 Bd Zerktouni
Casablanca- Maroc



**JANUVIA® + GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique**

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ



Sitagliptine
comprimés pelliculés

MSD



100 mg

Januvia®

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Fabricants :

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Shotton Lane, Cramlington
Northumberland NE23 3JU
Royaume-Uni

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

Merck Sharp & Dohme
166, 168 Bd Zerktouni
Casablanca- Maroc



**JANUVIA® + GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique**

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ



Sitagliptine
comprimés pelliculés

MSD



100 mg

Januvia®

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Fabricants :

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Shotton Lane, Cramlington
Northumberland NE23 3JU
Royaume-Uni

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

Merck Sharp & Dohme
166, 168 Bd Zerktouni
Casablanca- Maroc



**JANUVIA® + GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique**

P.P.V: 393,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.

AMM N° : 121/14/DMP/21/NRQ

On-Call[®] Plus

Blood Glucose Test Strips Age Insert

REF G133-111, REF G137	English
REF G133-118, REF G13	

PRINCIPLE INTENDED USE

The On Call[®] Plus Blood Glucose Test Strips are thin strips with a chemical reagent system. They work with the On Call[®] Plus or On Call[®] EZ II Blood Glucose Meters to measure the glucose concentration in whole blood. Blood is applied to the end tip of the test strip, then automatically absorbed into the reaction cell where the reaction takes place. A transient electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is calculated based on the electrical current detected by the meter, then the result is shown on the meter display. The meters are calibrated to display plasma-like concentration results. For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the body for testing purposes. For self-testing and professional use. On Call[®] Plus Test Strips are used by people with diabetes at home and by healthcare professionals for the quantitative measurement of glucose in capillary whole blood from the finger, forearm, and palm.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 IU, Mediator < 300 µg. Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.
- Note:** All expiration dates are printed in Year-Month-Day format.
- Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

PRECAUTIONS

- For *in vitro* diagnostic use. The test strips are to be used only outside the body for testing purposes.
- Do not use test strips after the expiration date shown on the vial. Expired test strips may give incorrect blood glucose readings.
- Do not use test strips that are torn, bent, or damaged in any way. Do not reuse test strips.
- The sample must only be applied to the tip of the test strip. Do not apply blood or control solution to the top of the test strip as this may result in an inaccurate reading.
- Before running a blood glucose test, make sure that the code chip contained with that vial of strips is inserted into the code chip slot on the right side of the meter.
- Discard the vial and any unused test strips 6 months after you first open it. Constant exposure to air may destroy chemicals in the test strip. This damage can cause incorrect readings.
- Keep the test strip vial away from children and animals.
- Consult your physician or healthcare professional before making any changes in your treatment plan based on your blood glucose test results.
- These products are labeled with the  symbol to distinguish them from earlier product versions that were subject to the EN ISO 15197:2015 non-compliance. Test strips with the symbol are compatible only with the control solutions that have the same symbol. The symbol can be found on the boxes, labels and individual pouches.

MATERIALS PROVIDED

- Test Strips
- Code Chip
- Package Insert

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

- Meter
- Sterile Lancets
- Lancing Device
- Control Solution

INSTRUCTIONS FOR USE

See your User's Manual for complete instructions for blood sample collection before use.

- Open the cap of the test strip vial only to remove a test strip for testing. Replace the cap immediately to protect the remaining test strips from moisture in the air.
- Run the blood glucose test following the instructions contained in your User's Manual.
- The blood glucose test result will be shown on the meter display window. This result should fall within the target range recommended by your healthcare professional. If your blood glucose test results are higher or lower, ask your healthcare professional what to do. Always consult your healthcare professional before making any changes to your treatment plan.

IMPORTANT: On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems allow alternative site testing for forearm and palm testing in addition to fingertip testing. There are important differences between forearm, palm and fingertip samples that you should know. Important information about forearm and palm glucose testing:

- When blood levels are changing rapidly such as after a meal, insulin dose or exercise, blood from the fingertips may show these changes more rapidly than blood from other areas.
- Fingertips should be used if testing is within 2 hours of a meal, insulin dose or exercise and any time you feel glucose levels are changing rapidly.
- You should test with the fingertips anytime there is a concern for hypoglycemia or you suffer from hypoglycemia unawareness.

RANGE OF EXPECTED BLOOD GLUCOSE VALUES

Blood glucose monitoring requires the help of a person who knows their own range of expected blood glucose values and the meaning of your blood glucose results.

Expected blood glucose levels for people without diabetes:

Time	Range
Fasting and Before Meals	70 - 100 mg/dL
2 Hours After Meal	Less than 140 mg/dL

CHECKING THE METER

Your blood glucose meter must be handled according to the instructions for meter care. The quality control test strips are working together properly. Follow the instructions for a quality control test. Three ranges CTRL 0, CTRL 1, and CTRL 2. Control Solution 1 is sufficient for most meters. If your strips may not be working correctly, you may want to contact your dealer for information on purchasing control solution. For confirmation of results, Control Solution 0 test strips should fall within the CTRL 1 range. For results to be within the CTRL 2 range. When testing with Control Solution 1, the results to the CTRL 1 range on the vial label. **CAUTION:** If your quality control test result falls outside the CTRL 1 range, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your dealer.

LIMITATIONS

- The On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II meters are not to be used for the On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems. They have been tested and proven to work together effectively for blood glucose measurements. Do not use components from other meters.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 20%) blood glucose levels may affect the accuracy of the results. Talk to your healthcare professional to find out more about these levels.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect the accuracy of the blood glucose measurements.
- The system is tested to accurately read the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL). Fatty substances (triglycerides) up to 3,000 mg/dL may affect the accuracy of the results.
- The On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems are shown to work properly up to 10,000% (33.3 mmol/L) of blood glucose.
- Severely ill persons should not run the glucose Blood Glucose Monitoring System.
- Blood samples from patients in shock, or with hypotension, or with hyperosmolar state (with or without ketosis) may give inaccurate results when tested with On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems.
- Dispose of blood samples and materials carefully. Do not dispose of materials in the trash.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems meet the requirements of EN ISO 15197:2015 (*in vitro* diagnostic systems for self-testing in blood glucose monitoring systems for self-testing in blood glucose monitoring systems) and On Call[®] EZ II meters are calibrated by the Analyzer reference instrument, which is traceable to the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) reference instrument.

Reproducibility, Precision

Ten replicate assays were each run on ten On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II meters. The following reproducibility, precision estimates were obtained from the ten replicate assays.

MEAN	2.1 mmol/L (38 mg/dL)	4.9 mmol/L (89 mg/dL)
Standard Deviation mmol/L (mg/dL)	0.08 mmol/L (1.4 mg/dL)	0.14 mmol/L (2.5 mg/dL)
Coefficient of Variation (CV)	3.8%	2.8%

Intermediate Precision

Ten replicate assays drawn from 3 strip lots were run on each meter. These tests were run each day for a concentration levels were used in the testing. The following intermediate precision estimates were obtained.

Control Solution Level	MEAN
Low (CTRL 0)	1.9 mmol/L (33.5 mg/dL)
Normal (CTRL 1)	6.4 mmol/L (115.3 mg/dL)
High (CTRL 2)	18.8 mmol/L (338.9 mg/dL)

System Accuracy

The capillary blood glucose measurements from the On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems were obtained from fingertip, palm and forearm samples. Meter testing. Fingertip samples from the same person were tested on the 2300 STAT PLUS Glucose Analyzer (x). The results are shown below.

Linear Regression Results: On Call [®] Plus		
Sample Site	Slope	Intercept
Fingertip	0.9962	-0.0018
Palm	0.9954	-0.0018
Forearm	0.9930	-0.0018

On-Call[®] Plus

Blood Glucose Test Strips Age Insert

REF G133-111, REF G137	English
REF G133-118, REF G13	

PRINCIPLE INTENDED USE

The On Call[®] Plus Blood Glucose Test Strips are thin strips with a chemical reagent system. They work with the On Call[®] Plus or On Call[®] EZ II Blood Glucose Meters to measure the glucose concentration in whole blood. Blood is applied to the end tip of the test strip, then automatically absorbed into the reaction cell where the reaction takes place. A transient electrical current is formed during the reaction and the blood glucose concentration is calculated based on the electrical current detected by the meter, then the result is shown on the meter display. The meters are calibrated to display plasma-like concentration results. For *in vitro* diagnostic use. Test strips are to be used only outside the body for testing purposes. For self-testing and professional use. On Call[®] Plus Test Strips are used by people with diabetes at home and by healthcare professionals for the quantitative measurement of glucose in capillary whole blood from the finger, forearm, and palm.

COMPOSITION

Each test strip contains the following reactive chemicals: Glucose oxidase < 25 IU, Mediator < 300 µg. Each test strip vial contains a drying agent.

STORAGE AND HANDLING

- Test strips should be stored in their protective vial. The vial's cap must be tightly closed. This is to keep the test strips in good working condition.
- Store test strips in a cool, dry place at room temperature, 2-35°C (36-95°F). Store them away from heat and direct sunlight.
- Do not freeze or refrigerate.
- To ensure accurate results, use the test strips at room temperature.
- Do not store the test strips outside their protective vial. Test strips must be stored in the original vial with the cap tightly closed.
- Do not store or use the test strips in a humid place such as a bathroom.
- Do not store the meter, the test strips or control solution near bleach or cleaners that contain bleach.
- Do not transfer the test strips to a new vial or any other container.
- Replace the vial cap immediately after removing a test strip.
- Use the test strip immediately after removing it from the vial.
- Do not use your test strips past the unopened expiration date printed on the vial. Using test strips past the expiration date may produce incorrect test results.
- Note:** All expiration dates are printed in Year-Month-Day format.
- Use a new vial of test strips for only 6 months after opening. The opened vial expiration date is 6 months after the vial was first opened. Write the opened vial expiration date on the vial label after you open it.

PRECAUTIONS

- For *in vitro* diagnostic use. The test strips are to be used only outside the body for testing purposes.
- Do not use test strips after the expiration date shown on the vial. Expired test strips may give incorrect blood glucose readings.
- Do not use test strips that are torn, bent, or damaged in any way. Do not reuse test strips.
- The sample must only be applied to the tip of the test strip. Do not apply blood or control solution to the top of the test strip as this may result in an inaccurate reading.
- Before running a blood glucose test, make sure that the code chip contained with that vial of strips is inserted into the code chip slot on the right side of the meter.
- Discard the vial and any unused test strips 6 months after you first open it. Constant exposure to air may destroy chemicals in the test strip. This damage can cause incorrect readings.
- Keep the test strip vial away from children and animals.
- Consult your physician or healthcare professional before making any changes in your treatment plan based on your blood glucose test results.
- These products are labeled with the  symbol to distinguish them from earlier product versions that were subject to the EN ISO 15197:2015 non-compliance. Test strips with the symbol are compatible only with the control solutions that have the same symbol. The symbol can be found on the boxes, labels and individual pouches.

MATERIALS PROVIDED

- Test Strips
- Code Chip
- Package Insert

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

- Meter
- Sterile Lancets
- Lancing Device
- Control Solution

INSTRUCTIONS FOR USE

See your User's Manual for complete instructions for blood sample collection before use.

- Open the cap of the test strip vial only to remove a test strip for testing. Replace the cap immediately to protect the remaining test strips from moisture in the air.
- Run the blood glucose test following the instructions contained in your User's Manual.
- The blood glucose test result will be shown on the meter display window. This result should fall within the target range recommended by your healthcare professional. If your blood glucose test results are higher or lower, ask your healthcare professional what to do. Always consult your healthcare professional before making any changes to your treatment plan.

IMPORTANT: On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems allow alternative site testing for forearm and palm testing in addition to fingertip testing. There are important differences between forearm, palm and fingertip samples that you should know. Important information about forearm and palm glucose testing:

- When blood levels are changing rapidly such as after a meal, insulin dose or exercise, blood from the fingertips may show these changes more rapidly than blood from other areas.
- Fingertips should be used if testing is within 2 hours of a meal, insulin dose or exercise and any time you feel glucose levels are changing rapidly.
- You should test with the fingertips anytime there is a concern for hypoglycemia or you suffer from hypoglycemia unawareness.

RANGE OF EXPECTED BLOOD GLUCOSE VALUES

Blood glucose monitoring requires the help of a person who knows their own range of expected blood glucose values and the meaning of your blood glucose results.

Expected blood glucose levels for people without diabetes:

Time	Range
Fasting and Before Meals	70 - 100 mg/dL
2 Hours After Meal	Less than 140 mg/dL

CHECKING THE METER

Your blood glucose meter must be handled according to the instructions for meter care. The quality control test strips are working together properly. Follow the instructions for a quality control test. Three ranges CTRL 0, CTRL 1 and CTRL 2. Control Solution 1 is sufficient for most meters. If your strips may not be working correctly, you may want to contact your dealer for information on purchasing control solution. For confirmation of results, Control Solution 0 test strips should fall within the CTRL 1 range. For CTRL 1 tests should fall within the CTRL 1 range. When testing with Control Solution 1, the results to the CTRL 1 range on the vial label. **CAUTION:** If your quality control test result falls outside the CTRL 1 range, DO NOT use the system to test your blood glucose. If you cannot correct the problem, contact your dealer.

LIMITATIONS

- The On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II meters are not intended for use with On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems tested and proven to work together effectively.
- Use only with whole blood. Do not use with plasma or serum.
- Do not use for testing neonates.
- Very high (above 60%) and very low (below 20%) blood glucose levels may affect the accuracy of the results. Talk to your healthcare professional to find out more.
- Abnormally high levels of vitamin C and other substances may affect the accuracy of the results.
- The system is tested to accurately read the range of 1.1-33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL).
- Fatty substances (triglycerides) up to 3,000 mg/dL may affect the accuracy of the results.
- The On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems are shown to work properly up to 10,000% (300 mg/dL).
- Severely ill persons should not run the glucose monitoring system.
- Blood samples from patients in shock, or with severe hypoglycemia, or with hyperosmolar state (with or without ketosis) may give inaccurate results when tested with On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems.
- Dispose of blood samples and materials carefully. Do not dispose of materials in the trash.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems meet the requirements of EN ISO 15197:2015 (*in vitro* diagnostic systems for self-testing in blood glucose monitoring systems for self-testing in blood glucose monitoring systems) and On Call[®] EZ II meters are calibrated by the Analyzer reference instrument, which is traceable to the International System of Units (SI).

Reproducibility, Precision

Ten replicate assays were each run on ten On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II meters. The following reproducibility, precision estimates were obtained:

MEAN	2.1 mmol/L (38 mg/dL)	4.9 mmol/L (89 mg/dL)
Standard Deviation mmol/L (mg/dL)	0.08 mmol/L (1.4 mg/dL)	0.14 mmol/L (2.5 mg/dL)
Coefficient of Variation (CV)	3.8%	2.8%

Intermediate Precision

Ten replicate assays drawn from 3 strip lots were run on each meter. These tests were run each day for a concentration levels were used in the testing. The following intermediate precision estimates were obtained:

Control Solution Level	MEAN
Low (CTRL 0)	1.9 mmol/L (33.5 mg/dL)
Normal (CTRL 1)	6.4 mmol/L (115.3 mg/dL)
High (CTRL 2)	18.8 mmol/L (338.9 mg/dL)

System Accuracy

The capillary blood glucose measurements from the On Call[®] Plus and On Call[®] EZ II Blood Glucose Monitoring Systems were obtained from fingertip, palm and forearm samples. Meter testing. Fingertip samples from the same person were tested on the 2300 STAT PLUS Glucose Analyzer (x). The results are shown below:

Linear Regression Results: On Call [®] Plus		
Sample Site	Slope	Intercept
Fingertip	0.9962	-0.001
Palm	0.9954	-0.001
Forearm	0.9930	-0.001