

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0026596

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6181 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : Bachari Saïd

Date de naissance : 26/12/1961

Adresse : n°31 Rue Sidi Msahel Quai
Cheikh - Sellat

Tél. : 06 96075447 Total des frais engagés : 460,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr.S.KHASSIME
ORL et Chirurgie Cervico-faciale
INPE:061182945

Date de consultation : 07/12/2023

Nom et prénom du malade : Bachari Ahmed ALI Age : 3ans

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☒ Enfant

Nature de la maladie : Affection ORL

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 14/12/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/12/23	G		250,009	Dr. S. KHASSNE Chirurgie Dentaire - Faculté INPE: 061182945

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie RAHMANE Dr. Latif RAHMANE 2 Rue Ouhda May Sidi Bel Abbès Tél : 0333 8411111	07/12/23	210,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

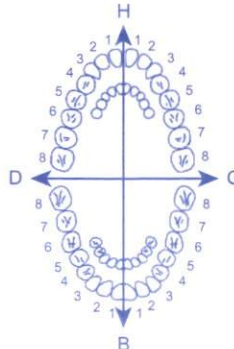
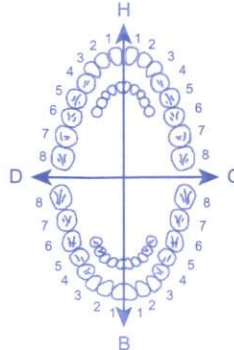
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table> (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
H																		
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
				MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. KHASSIME Sarra

**Spécialiste En Orl Et Chirurgie
Cervico-faciale**

Lauréat de la faculté de médecine de Casablanca
Ancienne interne du CHU Ibn roche de Casablanca
Ancien médecin ORL de l'hôpital Hassan 2 de Settat



د. سارة خصيم

**أخصائية في أمراض وجراحة الأذن
الأنف الحنجرة ، الحلق و الوجه**

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
طبيبة سابقة بمستشفى الحسن الثاني بـسطات

ORDONNANCE

Nom et prénom :

Settat le 07/12/23

Ahmed Ali Bachani

117,00

Physiomer hypertonic (SV)

x 3/1

93,50

2 J Otosan baby (SV)

210,50 I pulv x 2 J

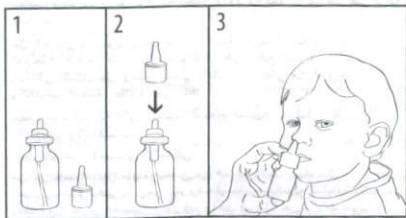
Pharmacie TAHAMANE
Dr Lotfi IDRISSI
2, Rue Ourika Hay, 5111 Abdelkrim
Settat

Dr KHASSIME SARRA
ORL
Chirurgie Cervico-faciale
Bd Mohamed V, Lot Alqods N°1
INRE: 061182948
Tél: 05 23 72 299

OTOSAN®

NASAL SPRAY

Baby



IT

SOLUZIONE IPERTONICA DI ACQUA DI MARE DI BRETAGNA CON ALOE VERA GEL BIO, OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO BIO, RAME GLUCONATO E CARBOSSIMETILBETAGLUCANO.

DESTINAZIONE D'USO. Il dispositivo medico Otosan® Nasal Spray Baby è un decongestionante nasale per uso topico. Associa le proprietà della soluzione ipertonica di acqua di mare di Bretagna all'azione combinata dell'Aloe Vera Gel Biologico, dell'olio essenziale di Arancio Bio, del Rame gluconato e del Carbossimetilbetaglucano. La multi-azione di Otosan® Nasal Spray Baby si esplica localmente igienizzando le fosse nasali, liberando il naso dal muco in eccesso e aiutando a ridurre la congestione nasale. La sua formulazione delicata e priva di vasocostrittori ne fa un prodotto particolarmente indicato in età pediatrica, nelle donne in gravidanza o in allattamento e nei cardiopatici; in questi casi prima di utilizzare il dispositivo medico si consiglia sempre di consultare il medico. Non contiene gas propellenti.

INDICAZIONI. Otosan® Nasal Spray Baby è indicato come trattamento coadiuvante di primo impiego in presenza di processi infiammatori quali riniti di diversa origine (virali, batteriche o allergiche), sinusiti e secchezza delle mucose nasali, anche in seguito a operazioni chirurgiche.

POSOLOGIA. 1 nebulizzazione per narice 2-4 volte al giorno, per 10-15 giorni.

DESCRIZIONE. Otosan® Nasal Spray Baby è utile come coadiuvante nel trattamento della rinite acuta o rinosinusite, indipendentemente dalla causa che l'ha originata. I componenti del prodotto aiutano l'espulsione del muco in eccesso ed inoltre hanno effetti protettivi, emollienti e lenitivi sulla mucosa irritata. Allo stesso tempo, Otosan® Nasal Spray Baby igienizza le cavità nasali grazie alla ipertonicità della soluzione ed

all'azione di alcuni componenti che, richiamando l'acqua dalla mucosa, fluidificano il muco favorendo l'allontanamento di virus, batteri, pollini, macro e micro particelle. Il dispositivo medico è utile anche in casi di eccessiva secchezza delle mucose nasali. Otosan® Nasal Spray Baby induce sollievo, e crea un ambiente sfavorevole alla crescita batterica prevenendo le ricattizzazioni.

TOLLERABILITÀ. L'assenza di vasocostrittori e l'azione gentile dei suoi principi attivi rendono Otosan® Nasal Spray Baby un prodotto ben tollerato, per il quale ad oggi non sono noti effetti collaterali e controindicazioni e il cui uso frequente non comporta assuefazione e rischi di "rinite medicamentosa".

ISTRUZIONI PER L'USO. Soffiarsi il naso prima della nebulizzazione. Spruzzare la soluzione in ogni narice, tenendo la testa in posizione verticale. Dopo la nebulizzazione, premere leggermente col dito indice sulla narice, al fine di assicurare una ripartizione della soluzione sull'intera mucosa nasale. Un leggero e temporaneo pizzicore in seguito all'applicazione è da considerarsi una normale azione del prodotto. Dopo l'uso, sciacquare con acqua tiepida il beccuccio e asciugarlo con un fazzolettino di carta.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI. Conservare il dispositivo medico in un luogo asciutto, lontano da fonti di luce diretta e a fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Non usare in caso di ipersensibilità nota ai componenti. Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso molluschi e/o crostacei. Non utilizzare per modi e scopi diversi da quelli specificamente indicati dal fabbricante in queste istruzioni per l'uso. Non sono attualmente conosciute controindicazioni all'utilizzo dei componenti contenuti in Otosan® Nasal Spray Baby in gravidanza o allattamento, in questi casi prima di utilizzare il prodotto consultare il proprio medico. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento. I prodotti contenenti metalli divalenti quali il rame sono generalmente sicuri, ma potrebbero dare rari eventi di anosmia; in caso di effetti avversi sospendere subito il trattamento e consultare il medico. Il flacone è di uso strettamente personale: potrebbe essere un veicolo di infezione.

MULTI-AZIONE PER UNA PULIZIA DELICATA DELLE FOSSE NASALI ED UN RAPIDO EFFETTO DECONGESTIONANTE.

ACQUA DI MARE (CONCENTRATO)

= AZIONE IGIENIZZANTE ED EMOLLIENTE

L'acqua marina utilizzata nella formulazione proviene dal Mare della Bretagna, la cui composizione è simile ad una soluzione fisiologica, particolarmente ricca di sali minerali e oligoelementi necessari al nostro organismo. Oltre a pulire le fosse nasali e ad allontanare polvere e pollini, l'acqua marina in forma ipertonica favorisce la clearance muco-ciliare e la fluidità del muco in eccesso promuovendone l'espulsione.

ALOE VERA GEL DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA

= AZIONE PROTETTIVA ED IDRATANTE

I polisaccaridi presenti nel gel di Aloe Vera interagiscono con la mucina presente sulla superficie delle cavità nasali formando un gel adesivo che protegge la mucosa da agenti irritanti e microorganismi. Inoltre, questo stato protettivo idrata la superficie irritata, riducendo dolore, infiammazione e gonfiore.

OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA

= AZIONE RILASSANTE E PURIFICANTE

L'olio essenziale di Arancio si distingue per il suo aroma fresco e agrumato. Tra le sue molteplici proprietà vi è quella di proteggere da agenti esterni come microbi e batteri. È inoltre noto per la sua virtù rilassante, per allentare la tensione nervosa e contrastare l'insonnia, disturbi che possono insorgere in concomitanza con le malattie da raffreddamento.

RAME GLUCONATO

= AZIONE PROTETTIVA DELLA MUCOSA

Il rame gluconato è un oligoelemento che ha un'azione protettiva sulla mucosa nasale in quanto è una sostanza tossica per molti microrganismi patogeni inclusi i virus influenzali e adenovirus.

CARBOSSIMETILBETAGLUCANO

= AZIONE FLUIDIFICANTE E MUCOADESIVA

Derivato del Betaglucano, si tratta di un polisaccaride ottenuto per estrazione dalla parete delle cellule di lieviti e miceti. Rende più fluida la mucosa nasale e favorisce la mobilità muco-ciliare. Inoltre, grazie alla sua natura muco-adesiva favorisce il rilascio degli altri componenti del prodotto, garantendo un'azione del prodotto graduale e più efficace.

Otosan® Nasal Spray Baby è un dispositivo medico con marcatura CE. La valutazione di conformità garantisce che il prodotto rispetta i requisiti della direttiva europea 93/42/CEE sui dispositivi medici.

SMALTIMENTO

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito con cura, da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

EN

A HYPERTONIC SEA WATER SOLUTION CONTAINING SEA WATER FROM BRITTANY WITH ORGANIC ALOE VERA GEL, ORGANIC ORANGE ESSENTIAL OIL, COPPER GLUCONATE AND CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN.

USE. The Otosan® Nasal Spray Baby medical device is a nasal decongestant for topical use. It includes the properties of a hypertonic sea water solution containing sea water from Brittany and the combined action of organic Aloe Vera Gel, organic Orange Essential Oil, Copper gluconate and Carboxymethyl Betaglucan. The multi-action of Otosan® Nasal Spray Baby acts locally by deeply cleansing the nasal cavities, thus freeing the nose from excess mucus and helping to reduce nasal congestion. Thanks to its delicate formula and the fact that it is free from vasoconstrictors, this product is particularly suitable for children, pregnant women or women that are breastfeeding, and people with heart disease; in these cases, please always consult your doctor before using the medical device. Free from propellant gas.

INDICATIONS. Otosan® Nasal Spray Baby is ideal as a first adjuvant therapy for inflammatory processes, such as different types of rhinitis (viral, bacterial or allergic), sinusitis and dryness of the nasal mucosa, and for post-surgery.

DOSAGE. 1 spray per nostril, 2-4 times a day for 10-15 days.

DESCRIPTION. Otosan® Nasal Spray Baby is a useful adjuvant for treating acute rhinitis or rhinosinusitis, regardless of the cause of its origin. The product components help to expel excess mucus and have a protective, softening and soothing effect on the irritated mucosa. At the same time, Otosan® Nasal Spray Baby cleanses nasal cavities thanks to the hypertonic solution and the action of several components, which extract water from the mucosa, thus fluidifying mucus and helping to remove viruses, bacteria, pollen and macro and micro particles. The medical device is also useful in the event of excessive dryness of the nasal mucosa. Otosan® Nasal Spray Baby provides relief and creates a hostile environment for bacterial growth, thus preventing relapse.

TOLERABILITY. The absence of vasoconstrictors and the gentle action of its active ingredients make Otosan® Nasal Spray Baby a well tolerated product. Until today, no side effects or contraindications are known,

OTOSAN®

ISOPHARM
OTOSAN
NASAL BABY

93.50 dhs

NASAL
SPRAY

Baby

OTOSAN®

NATURAL PRODUCTS FOR A BETTER LIFE

however they could cause rare cases of anosmia; in the event of adverse effects, discontinue treatment immediately and consult a doctor. The bottle is strictly for personal use; it might carry infections.

A MULTI-ACTION PRODUCT TO GENTLY CLEANSE NASAL CAVITIES WITH A QUICK DECONGESTANT EFFECT.

SEA WATER (CONCENTRATE)

= CLEANSING AND SOFTENING ACTION

The sea water contained in this formula comes from the sea near Brittany. Its composition is similar to a saline solution and it is particularly rich in mineral nutrients and trace elements that are essential for our body. In addition to cleansing the nasal cavities and removing dust and pollen, hypertonic sea water favours mucociliary clearance and fluidity of excess mucus by favouring its expulsion.

ORGANIC ALOE VERA GEL

= PROTECTIVE AND HYDRATING ACTION

The polysaccharides found in the Aloe Vera Gel interact with mucin, which is present on the surface of the nasal cavities, thus forming an adhesive gel that protects the mucosa from irritants and microorganisms. Moreover, this protection hydrates the irritated surface, thus reducing pain, inflammation and swelling.

ORGANIC ORANGE ESSENTIAL OIL

= RELAXING AND PURIFYING ACTION

Orange Essential Oil stands out for its fresh aroma of citrus fruits. Among its many properties, it protects against external agents, such as microbes and bacteria. It is also known for its relaxing properties, since it eases nervous tension and contrasts insomnia, which may arise in connection with common colds.

COPPER GLUCONATE

= PROTECTIVE ACTION FOR THE MUCOSA

Copper gluconate is a trace element that protects the nasal mucosa since it is a toxic substance for many pathogenic microorganisms, including flu viruses and adenoviruses.

CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN

= FLUIDIFYING AND MUCO-ADHESIVE ACTION

It is a polysaccharide derived from betaglucan and obtained by extracting it from the cell walls of yeasts and fungi. It makes nasal mucus more fluid and favours mucociliary movement. Furthermore, since it is mucus-adhe-

ENT complications.

and in post-endonasal surgery: 1 to 4 sprays daily in each nostril, when determined by a doctor.

HYPERTONIC Decongestant

SYMPTÔMES:

Nasal congestion /
Blocked nose

INDICATIONS:

Colds, (+ Allergies,
Allergic rhinitis:
Hypertonic 135ml)

Baby

Baby Hypertonic ⁽¹⁾⁽²⁾

From 2 months
to 2 years old 60 ml

For nasal congestion due to cold, rhinitis and rhinopharyngitis:
2 to 3 times a day, a 1 to 2 seconds spray in each nostril.

Adults
&
Children

Hypertonic ⁽¹⁾⁽²⁾ 135 ml
From 2 years old

In case of allergic rhinitis, cold and sinusitis:
2 to 3 times a day, a 1 to 3 seconds spray in each nostril, up to 6 times a day.

Eucalyptus ⁽³⁾ 135 ml
From 6 years old

For the relief of nasal congestion:
2 to 3 times a day, a 1 second spray ONLY in each nostril.

PHYSIOMER® Nasal Aspirator and PHYSIOMER® Unidoses 20 x 5 ml or 30 x 5 ml, also available. **PHYSIOMER® Hypertonic and PHYSIOMER® Eucalyptus** Sprays are also available in convenient 20 ml pack. Products availability changes according to countries.

PHYSIOMER® est une gamme complète de produits de soin pour le nez à l'eau de mer naturelle.

ISOTONIQUE

Hygiène,
Prévention active

SYMPTÔMES:

Nez bouché
Nez qui coule

INDICATIONS:

Rhumes - Lavage nasal
quotidien pour l'hygiène
et la prévention.
Prévention des
complications ORL.

POUR QUI

PRODUITS

RECOMMANDATION D'UTILISATION

Bébé

Baby ⁽¹⁾⁽²⁾ 115 ml
A partir de 15 jours

En traitement des symptômes du nez, en cas de rhume ou de rhinopharyngite :
4 à 6 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine. En utilisation
quotidienne, en hygiène et prévention des infections nasales : 1 à 2 fois par jour,
pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.

Adultes
&
enfants

Kids ⁽¹⁾⁽²⁾ 115 ml
A partir de 2 ans

En traitement des symptômes du nez, en cas de rhume (nez qui coule et/ou bouché) ou
de grippe : 4 à 6 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine. En usage
quotidien, en hygiène et prévention : 1 à 2 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans
chaque narine.

Jet Normal ⁽¹⁾⁽²⁾ 135 ml
A partir de 6 ans

En traitement des symptômes du nez, en cas de nez encombré : 4 à 6 fois par jour,
pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine. Au quotidien, en hygiène et
prévention : 1 à 2 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.

Jet Fort ⁽¹⁾⁽²⁾ 210 ml
A partir de 10 ans

En cas de croûtes ou de sécrétions nasales épaisses, collantes et purulentes : 1 à
4 pulvérisations par jour dans chaque narine. En cas de gêne nasale chronique,
pathologies rhinosinusitiques et dans les suites de chirurgie endonasale et
endosinusale : 1 à 4 pulvérisations par jour dans chaque narine, quand déterminé par un
médecin.

HYPERTONIQUE Décongestionnant

SYMPTÔMES:

Congestion nasale
Nez bouché

INDICATIONS:

Rhumes, (+ Allergies,
Rhinites allergiques :
Hypertonic 135ml)

Bébé

Baby Hypertonic ⁽¹⁾⁽²⁾ 60 ml
De 2 mois à 2 ans

En cas de congestion nasale liée au rhume, à la rhinite et la rhinopharyngite :
2 à 3 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.

Adultes
&
enfants

Hypertonic ⁽¹⁾⁽²⁾ 135 ml
A partir de 2 ans

En cas de rhinite allergique, rhume et sinusite : 2 à 3 fois par jour, pulvériser
1 à 3 secondes dans chaque narine, jusqu'à 6 fois par jour.

Eucalyptus ⁽³⁾ 135 ml
A partir de 6 ans

Pour le soulagement de la congestion nasale : 2 à 3 fois par jour,
pulvériser 1 seconde SEULEMENT dans chaque narine.

PHYSIOMER® Mouche-bébé et PHYSIOMER® Unidoses 20 x 5 ml ou 30 x 5 ml, aussi disponibles. Les sprays **PHYSIOMER® Hypertonic et PHYSIOMER® Eucalyptus** sont également disponibles en format 20 ml. La disponibilité des produits varie selon les pays.

www.physiomer.com

ιατροτεχνολογικό προϊόν / Medical device / Dispositif médical

Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Revision date: / Date de révision: 2022-04



Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo
FRANCE - FRANCE

Διανομέας / Distributeur: / Distributeur:

ΩΜΕΤΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αριστοτέλους 19-21, 144 51 Μεταμόρφωση, Ελλάδα,
Τηλ.: 210 8188900

Διανομέας στην Κύπρο / Distributor in Cyprus:

C.A. Papaellinas Ltd, Λεωφόρος Γέννησης Κρανιώτη
179, 2235 Λατσίνα, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: 0035722741741



STERILE A ⁽¹⁾

30°C ⁽²⁾

25°C ⁽³⁾

0001545 14-27844

PHYSIOMER®

Όλα τα σφέλη
All the goodn
Tous les bien

Το **PHYSIOMER®** είναι μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων ρινικής φροντίδας.

ΙΣΟΤΟΝΑ

Υγιεινή,
Ενεργή Πρόληψη

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Καταρροή
Βουλωμένη μύτη

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Κρυολόγημα,
Καθημερινός ρινικός
καθαρισμός για υγιεινή
και πρόληψη,
Προλαμβάνει ΩΡΛ
επιπλοκές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Βρέφη

Baby ⁽¹⁾⁽²⁾ 115 ml
Για βρέφη από 15 ημερών

Για την αντιμετώπιση
κρυολογήματος ή ρινοφαρυγγίτιδας σε κάθε ρουθούνι
ρινικών λοιμώξεων: 1 έως 2 φορές την ημέρα, 1 ψεκασμός για 1 έως 2 δευτερόλεπτα σε κάθε ρουθούνι.

**Ενήλικες
& Παιδιά**

Kids ⁽¹⁾⁽²⁾ 115 ml
Από 2 ετών

Για την αντιμετώπιση
κρυολογήματος (καταρροή, ψεκασμός για 1 έως 2 δευτερόλεπτα σε κάθε ρουθούνι).
υγιεινή και πρόληψη: 1 έως 2 φορές την ημέρα, 1 ψεκασμός για 1 έως 2 δευτερόλεπτα σε κάθε ρουθούνι.

Normal Jet ⁽¹⁾⁽²⁾ 135 ml
Από 6 ετών

Για την αντιμετώπιση
συμφορήσης: 4 έως 6 φορές την ημέρα, 1 ψεκασμός για 1 έως 2 δευτερόλεπτα σε κάθε ρουθούνι. Για καθημερινό καθαρισμό των ρινικών διόδων.

Strong Jet ⁽¹⁾⁽²⁾ 210 ml
Από 10 ετών

Σε περίπτωση ρινικών εκκρίσεων ή σε περιπτώσεις κρούστας.
Σε περίπτωση χρόνιας ρινικής συμφόρησης, ενδορινικών και ενδοκαρικών παθήσεων, ψεκασμοί την ημέρα σε κάθε ρουθούνι, εφόσον συστήνεται από τον γιατρό.

ΥΠΕΡΤΟΝΑ

Αποσυμφορήση
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Ρινική συμφόρηση /
βουλωμένη μύτη

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Κρυολόγημα,
(+ Αλλεργίες,
Αλλεργική ρινίτιδα:
Υπέρτονο 135ml)

Βρέφη

Baby Υπέρτονο ⁽¹⁾⁽²⁾
Από 2 μηνών έως 2 ετών
60 ml

Για ρινική συμφόρηση που οφείλεται σε κρυολόγημα, ρινίτιδα και ρινοφαρυγγίτιδα : 2 έως 3 φορές την ημέρα, 1 ψεκασμός για 1 έως 2 δευτερόλεπτα σε κάθε ρουθούνι.

**Ενήλικες
& Παιδιά**

Υπέρτονο ⁽¹⁾⁽²⁾ 135 ml
Από 2 ετών

Σε περίπτωση αλλεργικής ρινίτιδας, κρυολογήματος και ιγμορίτιδας : 2-3 φορές την ημέρα, 1 ψεκασμός για 1 έως 3 δευτερόλεπτα σε κάθε ρουθούνι, μέχρι και 6 φορές την ημέρα.

Ευκάλυπτος ⁽³⁾ 135 ml
Από 6 ετών

Για ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση : 2 έως 3 φορές ημερησίως, 1 ψεκασμός ΜΟΝΟ διάρκειας 1 δευτερολέπτου σε κάθε ρουθούνι.

Διατίθενται επίσης τα προϊόντα : **PHYSIOMER® Ρινικός Αποφρακτής** και **PHYSIOMER® Αμπούλες** σε συσκευασία 20 x 5 ml ή 30 x 5 ml.
Τα σπρέι **PHYSIOMER® Υπέρτονο** και **PHYSIOMER® Ευκάλυπτος** διατίθενται και σε πρακτική συσκευασία των 20 ml.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλάζει ανάλογα τη χώρα.

PHYSIOMER® is a complete range of natural seawater nasal care products.

ISOTONIC

Hygiene,
Active prevention

SYMPTOMS:

Runny nose
Stuffy nose

INDICATIONS:

Colds - Daily Nasal
cleansing for hygiene and
prevention, Prevents

FOR WHO

Baby

PRODUCTS

Baby ⁽¹⁾⁽²⁾ 115 ml
From 15 days of age

**Adults
& Children**

Kids ⁽¹⁾⁽²⁾ 115 ml
From 2 years old

Normal Jet ⁽¹⁾⁽²⁾ 135 ml
From 6 years old

Strong Jet ⁽¹⁾⁽²⁾ 210 ml
From 10 years old

RECOMMENDED USE

In treatment of nasal symptoms, in case of cold or rhinopharyngitis: 4 to 6 times a day, spray 1 to 2 seconds in each nostril. **In daily use, in hygiene and prevention of nasal infections:** 1 to 2 times a day, spray 1 to 2 seconds in each nostril.

In treatment of nasal symptoms, in case of cold (runny and/or stuffy nose) or flu: 4 to 6 times a day, spray 1 to 2 seconds in each nostril. **In daily use, in hygiene and prevention:** 1 to 2 times a day, spray 1 to 2 seconds in each nostril.

In treatment of nasal symptoms, in case of stuffy nose: 4 to 6 times a day, spray 1 to 2 seconds in each nostril. **In daily use, in hygiene and prevention:** 1 to 2 times a day, spray 1 to 2 seconds in each nostril.

In case of scabs or thick, sticky, purulent nasal discharge: 1 to 4 sprays daily in each nostril. **In case of chronic nasal discomfort, rhinosinusal pathologies**



IMPORTER & DISTRIBUTOR:

S.I.C.
Bldg n°56 - Str
Maadi - Cairo
Registration n° 46

استيراد شركة ستار للتجارة الدولية
الغدوان

BOTTU SA

PPC : 117 DH 00

