

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Adhésion générale :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontique, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la Mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de réductions.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Traitement :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radiographie est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie Affection Longue Durée ALD ou ALC

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-524002

40055

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1430

Société

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : ENNASR BENDAOUD

Date de naissance : 31/12/1953

Adresse : 17 LOT. ARD ELKABIR RTE D'AZEMOUN
CASABLANCA

Tél : 066 132 12 02 Total des frais engagés : 1200,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 19/06/2020

Nom et prénom du malade : A. ENNASR Bendaoud

Age : 67

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète & Dyslip

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer le présent sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration et m'engage à avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) :



Adresses et liaisons utiles

Régulation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre A. el Ben Abdellah 6ème étage Angle Rue Mohammed Fakir et Rue el Ben Abdellah - Quartier de l'Orangerie
Casablanca 00000 Tel : 022 20 15 45 (3) - Fax : 05 21 22 78 13 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET MONTAGNÉS

Le patient est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué, en indiquant la nature des soins.

Important :
Vous devez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement par soins ainsi que le bande D.O.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	D.O.F. : 													
				COEFFICIENT DE TRAVAUX													
				MONTANTS DE SOINS													
				DEBUT DE RECUTON													
				FIN DE RECUTON													
D.O.F. PROTHÈSE DENTAIRES	DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MATHÉMATIQUE																
	<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15/2841</td> <td style="text-align: center;">27/43, 5/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">365/486</td> <td style="text-align: center;">10000/100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10/000</td> <td style="text-align: center;">1/2729, 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">553541</td> <td style="text-align: center;">1/49, 150</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>			H		15/2841	27/43, 5/2	365/486	10000/100	10/000	1/2729, 100	553541	1/49, 150	B			COEFFICIENT DE TRAVAUX
	H																
	15/2841	27/43, 5/2															
	365/486	10000/100															
	10/000	1/2729, 100															
553541	1/49, 150																
B																	
			MONTANTS DE SOINS														
			DATE DU DEBUT														
			DATE DE L'ECUTON														

[Création, renfort, alijonction]
Fonctionnel / Esthétique / Fonctionnel / Esthétique

VIS : ET CACIET DU PRATICIEN ATTEIGNANT LE DEVIS
VIS : ET CACIET DU PRATICIEN EN ATTENDANT L'EXECUTION

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de
Médecine de Toulouse
Spécialiste en
Endocrinologie - Diabète
Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol
- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD
- EASD
- MGSD

Société Francophone du Diabète
Association Européenne pour l'Etude du Diabète
Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le 19/06/2080

M. BENISSAOUD ENNABEK

200,00 x 2 - Banquette
= 400
6 Let's 1;

100 x 8
= 800

1200,00

MIKOU
ENDO
39, Bd El Meskini
Tél. 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail: familemikou@gmail.com

39, شارع رحال المسكيني - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (عيادة) : 05 22 31 16 30 - هاتف و فاكس : 05 22 31 06 74
39, Bd Rahal El Meskini - 2^{ème} étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail: familemikou@gmail.com

PHARMACIE HAY EL MATAR

1, Bd oum rabii

DR EL MABROUKI HAKIM

R.C :294826

Patente:36027630

T.V.A :

C.N.S.S:

Banque:

Tél :0522932026

Le 19/08/2020

FACTURE N°42570

Page: 1

N° ICE : 000500191000056

N° IF : 51505764

BENDAOU ENNASR

Quantité	Désignation	Prix Public	T o t a l Prix Public
2	AC - CONTOUR PLUS BANDLETTE 50	200,00	400,00
8	AC - CONTOUR PLUS BANDLETTE 25	100,00	800,00
Total =			1 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :
Mille Deux Cent DIRHAMS.

7636

Contour™ plus

Blood Glucose Test Strips


Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

للاختبار الذاتي • جهت خودآزمایی

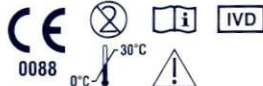

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

جميع الحقوق © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG محفوظة. (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك الحقوق محفوظة. (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم. برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001241

Rev. 02/18

Contour™ plus

كونتور پلاس / كونتور پلاس



50

Test Strips
Bandelettes
réactivesشرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec

للاستخدام مع أجهزة قياس سكر الدم / مع أجهزة قياس سكر الدم

Contour™ Plus

Meters / lecteurs

كونتور پلاس / كونتور پلاس

REF 84627454

Contour™ plus

كونتور پلاس / كونتور پلاس

Blood Glucose Test Strips

Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

200.00

Bar
réact
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



7636

Contour™ plus

Blood Glucose Test Strips

Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

للاختبار الذاتي • جهت خودآزمایی



0088

30°C
0°C

5 016003 763601



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

جميع الحقوق © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG محفوظة. Contour (كوتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك الحقوق محفوظة. Contour (كوتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم. برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001241

Rev. 02/18

Contour™ plus

كوتور پلس / كوتور پلاس



50

Test Strips
Bandelettes
réactivesشرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
l'adaptateur de l'appareil / مع جهاز الاستعدادية

مستشكبات تست قند الدم

Contour™ Plus

Meters / lecteurs

كوتور پلس / كوتور پلاس

REF 84627454

Contour™ plus

كوتور پلس / كوتور پلاس

Blood Glucose Test Strips

Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

200.00

Bar
réact
شرائط اختبار
نوار تست

NO
CODING
SANS CODAGE



Contour₊plus

كنتير بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
تير ستر غلوكوز الدم
باندليتس ريكافيف دي غليسيم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

لاختبار ذاتي • لمتابعة ذاتي



0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour₊ is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour₊ est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

جميع الحقوق محفوظة

Contour₊ (التركي) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

محمودة حقوقها

Contour₊ (التركي) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

جميع الحقوق محفوظة

Contour₊ (التركي) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

جميع الحقوق محفوظة

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact

information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, Tehran, Iran
Tel: +98 9655637

Phone: +98 21 26218396

ABAGAD HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADAGAWU STREET, SIMULURE, LAGOS, NIGERIA
Tel: +234 8033131500

Email: ahs@abagad.com
NMPDC REG. NO. 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
شريط اختبار

For use with / À utiliser avec
Contour₊ Plus
Mass / Réactif
غلوكوز الدم / كنتير بلس

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
شريط اختبار

100.00

25
Test Strips
Bandelettes
شريط اختبار
NO CODING
SAHS COAGE

Contour plus
Contour plus
Contour plus
Contour plus

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A

EXP 2018-11

EXP 2020-11

Contour₊plus

كنتير بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
تير ستر غلوكوز الدم
باندليتس ريكافيف دي غليسيم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

لاختبار ذاتي • لمتابعة ذاتي



0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour₊ is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour₊ est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

جميع الحقوق محفوظة

Contour₊ (التركي) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

محمودة حقوقها

Contour₊ (التركي) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

جميع الحقوق محفوظة

Contour₊ (التركي) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

جميع الحقوق محفوظة

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact

information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, Tehran, Iran
Tel: +98 9655637

Phone: +98 21 26218396

ABAGAD HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADAGAWU STREET, SIMPLURE, LAGOS, NIGERIA
Tel: +234 8033131500

Email: ahs@abagad.com
MFDAC REG. NO. 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
شريط اختبار
شريط اختبار

For use with / À utiliser avec
Contour₊ Plus
Bandelettes
شريط اختبار

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes
شريط اختبار

100.00

25
Test Strips
Bandelettes
شريط اختبار
شريط اختبار

Contour₊ Plus
Contour₊ Plus
Contour₊ Plus
Contour₊ Plus

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A

EXP 2018-11

EXP 2020-11


Contour₊plus

كنتور بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

الاستخدام المنزلي • لمتابعة مرض السكري

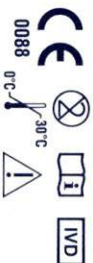

0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contura is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contura est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
جميع الحقوق محفوظة
Contura (الكنور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
جميع الحقوق محفوظة
Contura (الكنور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, Tehran, Iran
Tel: +98 9655637

Phone: +98 21 26218396

ABAGANT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADAGAWU STREET, SIMPLURE, LAGOS, NIGERIA
Tel: +234 8033131500
Email: info@abagant.com
NMDPRC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-use / À usage personnel
للمتابعة المنزلية / لمتابعة مرض السكري
Contour₊ Plus
Masses / Réactifs
قشر سكر الدم / كنتور بلس

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

100.00

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

Contour plus
Contour plus
Contour plus
Contour plus

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A
2018-11
2020-11


Contour₊plus

كنتور بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

الاستخدام المنزلي • لمتابعة مرض السكري

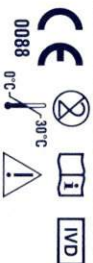

0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contura is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contura est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
جميع الحقوق محفوظة
Contura (الاسم) علامة تجارية وعلامة مسجلة

شركة كريك © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
مجموعة كريك
مجموعة كريك (الاسم) علامة تجارية وعلامة مسجلة

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم. للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, Tehran, Iran
Tel: +98 9655637

Phone: +98 21 26218396

ABAGAD HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADAGAWU STREET, SIMULURE, LAGOS, NIGERIA

TEL: +234 8033131500
Email: info@abagad.com
NMDPRC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-use / À usage personnel
استخدام منزلي / لمتابعة مرض السكري
Contour₊ Plus
Masses / Réactifs
قشر سكر الدم / كنتور بلس

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

100.00

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

NO CODING
SAHS COAGE

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A
2018-11
2020-11

Contour₊plus

كنتير بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
تير ستر غلوكوز الدم
باندليتس ريكافيف دي غليسيم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

لاختبار ذاتي • لمتابعة ذاتي



0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour₊ is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour₊ est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

جميع الحقوق محفوظة

Contour₊ (الترجمة) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

محمودة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG

محمودة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG

محمودة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact

information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, St.
Mehdiabad, Tehran, Iran

Tel: +98 21 8656537

Phone: +98 21 26218396

ABAGAD HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED

7, MORONI MADAGAWU STREET, SIMULURE, LAGOS.

TEL: +234 8033131500

Email: ahs@abagad.com

Website: www.abagad.com

NAFDAC REG. NO. 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
شريط اختبار
شريط اختبار

For use with / À utiliser avec
Contour₊ Plus
Bandelettes
شريط اختبار

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
شريط اختبار
شريط اختبار

100.00

25
Test Strips
Bandelettes
شريط اختبار
شريط اختبار

Contour₊ Plus
Contour₊ Plus
Contour₊ Plus
Contour₊ Plus

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A

EXP 2018-11

EXP 2020-11


Contour₊plus

كنتور بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

الاستخدام الذاتي • لاجل مراقبة السكر

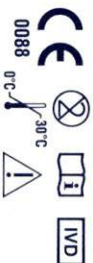

0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contura is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contura est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة.

Contura (قشر الدم) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

شركة كريك © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contura (قشر الدم) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة، يرجى رؤية معلومات الاتصال على الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, Tehran, Iran
Tel: +98 9655637

Phone: +98 21 26218396

ABAGANT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MOROJUN MADAGAWU STREET, SINGAPORE, SINGAPORE
Tel: +65 633131500
Email: info@abagant.com
MFAFAC REG. NO. 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-use / À usage personnel
للاستخدام الذاتي / للاستخدام الشخصي
Contour₊ Plus
Masses / Réactifs
قشر سكر الدم / كنتور بلس

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

100.00

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

NO CODING
SAHS COAGE

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A
2018-11
2020-11


Contour₊plus

كنتور بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

الاستخدام الذاتي • لاجل مراقبة السكر

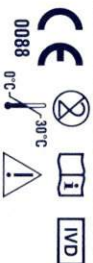

0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contura is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contura est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة.

العلامة التجارية (Contura) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة.

شركة كريك © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contura (كنتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة كريك.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.ascensia.com

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

تواصل مع خدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, St.
Tehran, Iran

Phone: +98 21 26218396

ABAGAD HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADAGASCAR STREET, SINGAPORE, SINGAPORE

TELEPHONE: +334803313500

Email: ahs@abagad.com

MFADAC REG. NO. 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

For self-use / À usage personnel
للاستخدام الذاتي / للاستخدام الشخصي
Contour₊ Plus
Masses / Réactifs
قشر سكر الدم / كنتور بلس

25
Test Strips
Bandelettes
قشر سكر الدم
قشر سكر الدم

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
قشر سكر الدم

100.00

NO CODING
SAHS COAGE

Contour plus
Contour plus
Contour plus
Contour plus

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A
2018-11
2020-11

Contour₊plus

كنتير بلس / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
تير ستر غلوكوز الدم
باندليتس ريكافيف دي غليسيم

For self-testing • Pour l'auto-surveillance

لاختبار ذاتي • لمتابعة ذاتية



0088

5 016003 763502



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour₊ is a trademark, and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour₊ est une marque de commerce et une marque déposée de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

جميع الحقوق محفوظة

Contour₊ (الترجمة) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة

محمودة كينتير (الترجمة) Contour₊ هو علامة تجارية مسجلة

شركة كريك Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

www.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

www.ascensia.com



For further assistance, please see contact

information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

للمزيد من المساعدة، يرجى مراجعة معلومات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

Damoon Tahiz Tea Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Street, St.
Mehran, Tehran, Iran

Phone: +98 21 26218396

Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

REF 84627446

25
Test Strips
Bandelettes
réactives
شريط اختبار
باندليتس ريكافيف

For use with / À utiliser avec
Contour₊ Plus
Masses / Réactifs
غلوكوز الدم / كينتير بلس

Contour₊ Plus
Blood Glucose
Bandelettes réactives
شريط اختبار
باندليتس ريكافيف

100.00

25

Test Strips
Bandelettes
réactives
شريط اختبار
باندليتس ريكافيف

NO CODING
SAHS COAGE

Contour₊ Plus
Contour₊ Plus
Contour₊ Plus
Contour₊ Plus

CONTROL N 110-142 mg/dL
CONTROL L 37-48 mg/dL
CONTROL H 325-422 mg/dL

LOT 0P8LQH32A

EXP 2018-11

EXP 2020-11