

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-654132

151292

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2364 Société :

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : RAFI Abdellatif

Date de naissance : 11/02/1952

Adresse : Residence AL FERDAOUS VILLA n°2 Av. Abdelhak

Boite 16 (ex Route Agmou) CASA

Tél. : 0661313027 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22/02/2024

Nom et prénom du malade : Rafi Abdellatif Age : 72

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : diabète type 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 04/03/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Docteur Meryem LAMNIJI

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca
Ancienne interne des hôpitaux de Casablanca
Diplômée de l'académie supérieure de nutrition
et de médecines holistiques de l'Ontario - Canada

Diabète

Nutrition clinique - Micronutrition

Surpoids - Obésité - Amincissement

Nutrition de l'enfant

Nutrition de la femme enceinte

الدكتورة مريم لمنيجي

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

داخلية سابقة بمستشفيات الدار البيضاء

خريجة الأكاديمية العليا للتغذية والطب الشمولي

مرض السكري

التغذية - التغذية الدقيقة

زيادة الوزن - السمنة - التخسيس

تغذية الطفل والمرأة الحامل

Casablanca, le 22/02/2023

Mr RAFI Abdelatif

20,80 x 2 = 41,60

- Calciphos 500

1cp/j le soir après Repas

114,10 x 3 = 342,30

- Crestor 5mg

1cp/j le soir après Repas x 3 mois

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Qi,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 5mg cp pel b30
P.P.V : 114,10 DH



Maphar
Bd Alkimia N° 6, Qi,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 5mg cp pel b30
P.P.V : 114,10 DH



صيدلية الساحل
PHARMACIE SAHEL
Mme BAKI Ghita
142, Bd Abdelhadi Boualeld Route d'Azelmour
Collé à la Fourrière Hay Hassan Casablanca
Tél : 05 22 90 38 38 - Fax : 05 22 65 81 23

Dr LAMNIJI Meryem
Médecin Nutritionniste Diabétologue
89 Bd Stendhal 3ème Etage N
Val Fleuri - Casablanca
Tél 05 27 25 87 48
INPE 091237230

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Qi,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 5mg cp pel b30
P.P.V : 114,10 DH



Tél : 0522 25 87 48 - Email : cabinetlamnji@gmail.com
89, BVD Stendhal. Apt 7 3ème étage. Val Fleuri - Casablanca
89. شارع سطاندا. رقم 7 الطابق 3. فال فلوري. الدار البيضاء

Docteur Meryem LAMNIJI

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca
Ancienne interne des hôpitaux de Casablanca
Diplômée de l'académie supérieure de nutrition
et de médecines holistiques de l'Ontario - Canada

Diabète

Nutrition clinique - Micronutrition

Surpoids - Obésité - Amincissement

Nutrition de l'enfant

Nutrition de la femme enceinte



الدكتورة مريم لمنيجي

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

داخلية سابقة بمستشفيات الدار البيضاء

خريجة الأكاديمية العليا للتغذية والطب الشمولي بكندا

مرض السكري

التغذية - التغذية الدقيقة

زيادة الوزن - السمنة - التخسيس

تغذية الطفل والمرأة الحامل

Casablanca, le 22/02/2023

Mr RAFI Abdelatif

200,00
280,00
Calcomètre + Bandelettes

50,00 + Lancettes

530,00 DT

ASG 1 Box x 3 mois

YES PARA SARL AU
61, Lalla Yacout Angé Mustapha
El Meani 2^{ème} Etage N° 8
Casablanca - Tél : 0522 98 49 83

Dr LAMNIJI Meryem
Médecin Nutritionniste - Diabétologue
89 Bd Stendhal 3^{ème} Etage N° 7
Val Fleuri - Casablanca
Tél 05 22 25 87 48
INPE 091237230

Tél : 0522 25 87 48 - Email : cabinetlamniji@gmail.com

89, BVD Stendhal. Apt 7 3^{ème} étage. Val Fleuri - Casablanca

89. شارع سطاندا. رقم 7 الطابق 3. فال فلوري. الدار البيضاء

YES PARA

FACTURE N° : 202300054

RAFI ABDELLATIF

Casablanca le, 28/02/2023

Code Client : 000030

Code Article	Désignation	Qté	P.U.	Montant	Tva
2590	BIONIME BANDLETES 25U	4.00	70.00	280.00	20.00%
471062733803	BIONIME PAK	1.00	200.00	200.00	20.00%
628451168126	LENSIT	1.00	50.00	50.00	20.00%

YES PARA SARL AU
61, Lalla Yacout Angle Mustapha
El Maani 2 ème Etage N° 6
Casablanca - Tél : 0522 98 49 83

441.67	20 %	88.33

TOTAL H.T.	441.67
TOTAL T.V.A.	88.33
TOTAL T.T.C.	530.00

Arrêtée la présente facture à la somme de :
CINQ CENT TRENTE DH.

BIONIME

Blood Glucose Test Strip



2023-02-03

LOT

212122213

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1.4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

GS300**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use

Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)**Rightest™ GS300****Use with Rightest™ GM300**101-2GS300-1G2
EN**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.
2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

**Rightest™ GS300****BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com

CE REP

BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch



BIONIME

Blood Glucose Test Strip



2023-02-03

LOT

212122213

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1.4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

GS300**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use

Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)**Rightest™ GS300****Use with Rightest™ GM300**101-2GS300-1G2
EN**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.
2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

**Rightest™ GS300****BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com

CE REP

BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch



BIONIME

Blood Glucose Test Strip



2023-02-03

LOT

212122213

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1.4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

GS300**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use

Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)**Rightest™ GS300****Use with Rightest™ GM300**101-2GS300-1G2
EN**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.
2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

**Rightest™ GS300****BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com

CE REP

BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch



BIONIME

Blood Glucose Test Strip



2023-02-03

LOT

212122213

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1.4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

GS300**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

25 PCS (a vial of 25)**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use

Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)**Rightest™ GS300****Use with Rightest™ GM300**101-2GS300-1G2
EN**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.
2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

**Rightest™ GS300****BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com

CE REP

BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch





STAR MED
LANCETTE



STAR MED
LANCETTE




MODE D'EMPLOI :

- Insérer la lancette dans le stylo auto-piqueur
- Tourner puis tirer pour enlever le capuchon protecteur
- Insérer la lancette dans le capuchon après utilisation

SPECIFICATION :


- Usage unique
- Ultra fine
- Pointe biseauté
- Facile à utiliser
- Stérile
- Emballage en polyéthylène

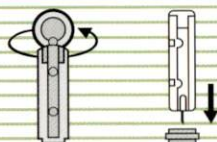

MISE EN GARDE :

- Ne pas utiliser en cas de cassure du capuchon de protection
- Ne pas stocker la lancette dans le stylo-auto-piqueur
- Ne pas réutiliser les lancette

STERILE R

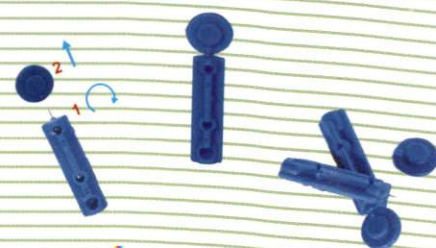

30G
100PCS

FABRICATION :

Numéro de lot :	2012095
Date de fabrication :	2020-12-15
Date d'expiration :	2025-12-14

Manufactured By:
Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
A01, Plant B, No.278, Hangkong Road,
Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air Port
Industrial Park), Tianjin 300308, China
Distributed By:
Astute SARL
Unite Spl # 3, Hail Mohamadie #15
Marrakech, Morocco

RIGHTEST™

GM300

Le système de lecture de glycémie

- Un glucomètre
- Manuel utilisateur
- La clé de codage
- Check Key
- 10 lancettes
- 2 piles AAA
- Un étui de transport
- Autopiqueur
- 25 bandelettes réactives
- Guide d'utilisation abrégé
- Notice des bandelettes réactives

BIONIME

RIGHTEST™

GM300

Le système de lecture de glycémie

Our value :

Offering a worry-free testing experience, with lasting reliable results, professional performance, to be your everyday health partner.

Notre plus-value :

Offrir une expérience de test simple et sécurisée, avec des résultats fiables, une performance professionnelle, pour être votre partenaire au quotidien.



RIGHTEST™

GM300

Le système de lecture de glycémie

**Edition Gold limitée
avec 25 bandelettes**

Test Strip
GS300



BIONIME

BIONIME CORPORATION

No.100, Sec. 2, Daqing St.,
South Dist., Taichung City
40242, Taiwan

P. +886 4 2369 2388

F. +886 4 2261 7586

info@bionime.com



bionime.com

BIONIME

RIGHTEST GM300 BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

PART NO.: 99GM300021



SERIAL NO.: 2300UAM3439

STRIP EXP DATE : 2022-11-25



STRIP LOT NO.: 2120C2509



Manufacturer: BIONIME CORP.

No.100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan



4 710949 330422

IF PACKAGE CONTAINS STRIPS OR CONTROL SOLUTION,
PLEASE STORE AT TEMPERATURES UNDER 30°C (86°F). DO NOT FREEZE.

Lancet Manufacturer: SteriLance Medical (SuZhou) Inc.
No.68 Litanghe Road, Xiarfengcheng, Suzhou, 215133, China