

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mail utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème étage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (L.G.) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-468644

19 10 28 00 12

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6937 Société : RAN
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : Z. EL KHAYAT
 Date de naissance : 28/11/1980
 Adresse : 21, rue de la Liberté, Casablanca
 Tél. : 0661052145 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin **Dr. Rachid SAIR**

MEDECIN

73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage
 (en dessus CMCE) Bournazel - Casablanca
 Tél : 05 22 72 42 42

Cachet du médecin :

Date de consultation : 28 OCT 2019

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/07/2019			150,00	INP: 091224312 Dr. Rachid SAIR MEDECIN 73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage (en dessus H.M.C) Bournazel - Casablanca Tél: 05 22 72 42 42

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	28/10/19	252,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Laboratoire d'Analyses Médicales ANICHEM Docteur SAID ANICHEM Casablanca	28/10/19	B130	130,00

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
PHARMACIE IBNOULKHATIB Casa 229, Avenue 10 Mars Sidi Othman Tél.: 05 22 57 13 86 ICE: 001788829000051	07/11/19					570,00

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES																
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF																
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td> 25533412 00000000 00000000 35533411 </td> <td> 21433552 00000000 00000000 11433553 </td> </tr> <tr> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H		H	D	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	G			B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H		H													
	D	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553													
	G															
	B															
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel Thérapeutique, nécessaire à la prothèse			MONTANTS DES SOINS												
				DATE DU DEVIS												
				DATE DE L'EXECUTION												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Rachid SAIR

OMNIPRATICIEN



دكتور رشيد ساير

الطب العام

- Diplôme Universitaire de Diabetologie
- Université de Montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- Université de Montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (Lcmc)
- Echographie - ECG

• دبلوم جامعي في أمراض السكري
• جامعة مونتبولي - فرنسا
• حبة متقدمة لأمراض القلب
• دواء - كندا
• لدومي - أمراض القلب و الشرايين
• غرف المجلس الطبي الكندي
• التخطيط الكهربائي للقلب

28 OCT 2019

Casablanca, le : في الدار البيضاء

Ass Alami Mashafa



2.5 احده
42.00 x 6
282.00
1 - 2 - 3 - 4 - 5
~ 1 - 2 - 3 - 4 - 5

GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 42DH00



GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 42DH00



GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 42DH00



GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 42DH00



GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 42DH00



GLUCOVANCE® 500mg/2,5mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 42DH00



Dr. Rachid SAIR
MEDECIN

73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage
(en dessus BMCE) Bournazel - Casablanca
Tél : 05 22 72 42 42

Dr. Rachid SAIR

OMNIPRATICIEN



الدكتور رشيد ساير

الطب العام

- Diplôme Universitaire de Diabetologie
- Université de Montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- Université de Montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (Lcmc)
- Echographie - ECG

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- جامعة مونتبلي - فرنسا
- دبلوم رعاية صحية متقدمة لأمراض القلب
- جامعة مونتريال - كندا
- إرتفاع الضغط الدموي - أمراض القلب و الشرايين
- طبيب مجاز من طرف المجلس الطبي الكندي
- الفحص بالصدى - التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le : 28 OCT 2019 : الدار البيضاء في

Rachid Sair

Rachid Sair

Dr. Rachid SAIR
MEDECIN

73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage
(en dessus BMCE) Bournazel - Casablanca
Tél : 05 22 72 42 42

Laboratoire d'Analyses Médicales
Docteur SAID ANHICHEM
Casablanca



Le : 07/11/2019

PHARMACIE IBNOULKHATIB CASA

DOCTEUR IBNOULKHATIB NORA
Diplômée de la Faculté de Pharmacie Grenade (Espagne)

Facture N° 708 366 Du 07/11/2019 essakni mostafa

FORME	PRODUIT	QTE.	PRIX	QTE * PRIX
AC	BANDELETTES ACCU-CHEK / 25	1	135.00	135.00
AC	CODE FREE/25 BANDELETTES	1	112.50	112.50
AC	CODE FREE/25 BANDELETTES	1	112.50	112.50
AC	CODE FREE KIT	1	150.00	150.00
AC	LANCETTE CLEVER CHEK BLEU /100	1	60.00	60.00
5	Total	5		570.00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
CINQ CENT SOIXANTE-DIX DIRHAMS

570.00

PHARMACIE IBNOULKHATIB Casa
229, Avenue 10 Mars
Sidi Othman
Tél : 05 22 37 13 86
ICE: 001788829000051



RC : 363667
Patente : 37972247
IF : 20704638
ICE : 001788829000051
CNSS : 1565334

Pharmacie Ibnoulkhatib Casa
229, Avenue 10 Mars, Sidi Othman, Casablanca - Maroc
Tél. : 05 22 37 13 86
E-mail : pharmacie.ibnoulkhatib@gmail.com



مختبر أنهيشم للتحليلات الطبية والبيولوجية

Laboratoire ANHICHEM d'Analyses Médicales et Biologiques

الكيمياء السريرية والمناعة - فحص الدم - علم البكتيريا والفيروسات والطفيليات - الأمراض العامة - البيولوجيا التناسلية
Biochimie Clinique - Immunologie - Hématologie - Bactériologie - Virologie Clinique - Parasitologie Mycologie - Pathologie Médicale - Biologie de la Reproduction

Dr. Said ANHICHEM
Spécialiste en Biologie

الدكتور سعيد أنهيشم
اختصاصي التحليلات الطبية

Date d'enregistrement : 28-10-2019 à 07:29

Code patient : 1910280012

Né(e) le : 23-11-1960 (58 ans)

Mr ESSAKNI Mostafa

Prescripteur :

Dossier N° : 1910280012

CB:



BIOCHIMIE SANGUINE

KONELAB 20i (THERMO)/HPLC-723 GX /SMARTE LYTE

Glycémie à jeûn

(Technique Colorimétrique au glucose oxydase)

Résultat contrôlé.

Sous réserve d'un bon respect de jeûne.

1.83 g/L

(0.70-1.10)

10.16 mmol/L

(3.89-6.11)

Hémoglobine glyquée (HBA1c)

(Technique HPLC (GX HLC-723))

Résultat contrôlé.

11.0 %

Interprétation:

- Sujet normoglycémique : 4 à 6 % de l'hémoglobine totale
- Sujet diabétique équilibré : objectif ciblé 6,5 à 7%
- Diabète mal équilibré : taux supérieur à 8%

Validé par : Dr ANHICHEM Said

Laboratoire d'Analyses Médicales
ANHICHEM
Docteur SAID ANHICHEM
Casablanca

**LABORATOIRE ANHICHEM D'ANALYSES
MEDICALES**

Dr SAID
ANHICHEM
BIOLOGISTE

N°122 ,Av Akid Allam Hay My Rachid 2
Bournazil
Casablanca
Tél: 05 22 56 15 85 Fax: 05 22 56 15 86
IF: 14363584 ICE: 000349000000065

FACTURE N° : 190004079

CASABLANCA le 28-10-2019

Mr ESSAKNI Mostafa

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B

Total des B : 130

Total des HN : 0

TOTAL DOSSIER : 130.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cent trente dirhams .

Laboratoire d'Analyses Médicales
ANHICHEM
Docteur SAID ANHICHEM
Casablanca

SD CodeFree™

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

NEW

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

SD CodeFree™

Accurate &
Easy to Use

5sec. 5 Seconds
Fast Test Time

0.9µl 0.9µl Small
Blood Sample

Hypo Hypo
Warning

Mealmark Pre & Post
Meal Mark

No
Coding



GOLD ELECTRODE

SD BIOSENSOR

SD CodeFree™

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

SD CodeFree™ Blood Glucose Monitoring System

CONTENTS
Blood Glucose Meter (01GM11)
10 Blood Glucose Test Strips (01GS11A) (option)
1 STANDARD™ Glucose Check Strip (01GCH10)
1 STANDARD™ Glucose Control Solution - Level M (01GCS10-M) (option)
10 Lancets
Lancing device
3V battery type CR2032
Carrying case
User Instruction Guide
Self Test Diary

For in vitro diagnostic use only

SD CodeFree™ Blood Glucose Monitoring System is an in vitro
diagnostic medical device for self-testing.

Manufactured by
SD BIOSENSOR

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeonjong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sdbiosensor.com

CE
(967)



IVD

CE 0123

LOT / LOT NO.: C0318090
MFG DATE: 2018.11.02
EXP DATE: 2020.10.16

SD CodeFree™ Sistem de monitorizare a glicemiei

CONTINUT
Dispozitiv de masurare a concentratiei de glucoza din
sange (01GM11)
10 teste pentru determinarea glicemiei (01GS11A) (optional)
Test de verificare STANDARD™ (01GCH10)
Solutie de control STANDARD™ (01GCS10-M) (optional)
10 ace
Dispozitiv de intepare
Baterie de 3 V CR 2032
Borseta
Manual de utilizare
Jurnal de testari

Pentru utilizare in vitro

SD CodeFree™, Sistemul de monitorizare a concentratiei de glucoza
din sange este un dispozitiv medical de diagnostic in vitro pentru
auto-testare.

SD CodeFree™ Система для определения
глюкозы в крови

CONTENTS
Глюкометр (01GM11)
10 тест-полосок (01GS11A)
(поставляется по желанию покупателя)
Контрольная полоска (01GCH10)
Контрольный раствор STANDARD™ - уровень М (01GCS10)
(поставляется по желанию покупателя)
10 ланцетов
Прокалыватель
3В батарея (CR2032)
Футляр
Руководство пользователя
Дневник самоконтроля

Только для in vitro диагностики

Система мониторинга крови SD CodeFree™ является
медицинским диагностическим прибором для самопроверки.

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

Lancet
Refer to the separate label.
Lancing Device
Beijing Ruicheng Medical Supplies Co., Ltd.

Cat.No.: 01GC110
8 809319 390213
M801CF1M1RS
Issue date: 2017.11

Sistema portátil de monitoreo de glucosa en sangre
de SD CodeFree™

CONTENIDO
Medidor de glucosa en sangre (01GM11)
10 tiras de prueba de glucosa en sangre (01GS11A) (opcional)
STANDARD™ Tira de verificación (01GCH10)
Solución de Control de STANDARD™ Glucose - Nivel M
(01GCS10-M) (opcional)
10 lancetas
Dispositivo de punción
Batería 3V tipo CR2032
Estuche
Guía del usuario
Cuaderno de autoevaluación

Para diagnóstico in vitro únicamente.

SD CodeFree™, Sistema de Monitoreo de la Glucosa en Sangre,
para diagnóstico in vitro, es un dispositivo médico de uso personal.

Sistema de monitoramento de Glicose no Sangue de
SD CodeFree™

ÍNDICE
Medidor da glucose no sangue (01GM11)
10 Faixas para teste da glucose no sangue
(01GS11A) (opção)
STANDARD™ Faixa para verificação (01GCH10)
Solução de Controle de STANDARD™ Glucose - Nível M
(01GCS10-M) (opção)
10 lancetas
Dispositivo de lancetamento
Bateria de 3 V do tipo CR2032
Receptáculo para transporte
Manual rápido

Apenas para utilização de diagnóstico in vitro

SD CodeFree™, Sistema de Monitoramento da Glicose Sanguínea,
para diagnóstico in vitro, é um dispositivo médico para auto-teste.

SD CodeFree™ Sistema per la determinazione della
glicemia

CONTENUTO
Glucometro (01GM11)
10 Striscia Per Test Livello Di Glucosio Nel Sangue
(01GS11A) (opzionale)
Striscia di Controllo STANDARD™ Glucosio (01GCH10)
Soluzione di Controllo STANDARD™ Glucosio - Livello M
(01GCS10-M) (opzionale)
10 lancette
Penna Pungi-Dito
Batteria 3 V tipo CR2032
Borsa per il trasporto
Manuale D'Uso
Diario per l'autocontrollo

Per diagnostica in vitro uso esterno

Il Glucometro SD CodeFree™ è un sistema di diagnostica in vitro
per l'Auto-misurazione della glicemia capillare.

SD CodeFree™ Blutzucker Mess System

INHALT
Blutzuckermessgerät (01GM11)
10 Blutzucker Teststreifen (01GS11A) (option)
1 STANDARD™ Check Streifen (01GCH10)
STANDARD™ Glucose Kontrol Lösung - Level M
(01GCS10-M) (option)
10 Lanzetten
Stechhilfe
3V Batterie Typ CR2032
Etui
Bedienungsanleitung
Selbsttest Tagebuch

Nur geeignet für in-vitro

Das SD CodeFree™ Blutzuckermesssystem ist ein in-vitro-
Diagnostikum zur Eigenanwendung.

SD CodeFree™ Blood Glucose System

INHOUD
Bloedglucosemeter (01GM11)
10 Bloedglucoseteststrips (01GS11A) (Optioneel)
STANDARD™ Controlestrip (01GCH10)
STANDARD™ Controlevloeistof (01GCS10-M) (Optioneel)
10 Lancetten
Vingerprikparaat
3V Batterij type CR2032
Etui
Gebruikershandleiding
Diabetes Dagboek

Alleen voor uitwendig diagnostisch gebruik (in vitro)

Dit is een codervrije bloedglucosemeter en een uitwendig
(in vitro) diagnostisch medisch instrument voor zelftesten.

SD CodeFree™ Système de surveillance de
glycémie

COMPOSANTS
Glycomètre (01GM11)
10 bandelettes-test (01GS11A) (option)
STANDARD™ Bandelette de contrôle (01GCH10)
Solution de contrôle STANDARD™ Glucose - Niveau 2
(01GCS10-M) (option)
10 lancettes
Autopiqueur
Pile 3 V type CR2032
Etui de transport
Mode d'emploi
Calendrier

Pour usage in vitro uniquement

Le glycomètre SD CodeFree™ est un appareil médical de
diagnostic in vitro pour effectuer un autotest du taux
de glucose sanguin.

PPC: 135,00 Dhs

إنتباه

إذا كانت لديكم النسخة القديمة لـ
Accu-Chek Active
احتفظوا على الشريحة السوداء
بصفة نهائية




LOT

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

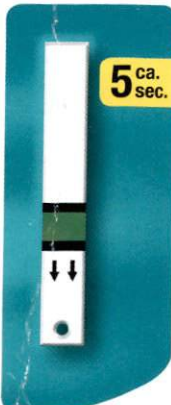

1 ACTIVATION CHIP

5 ca.
sec.

For the
determination of
blood glucose

Suitable for
self-testing


Only for
Accu-Chek® Active



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

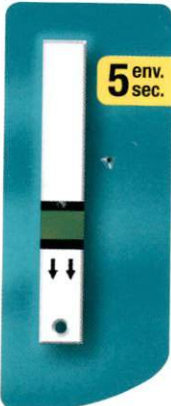

1 PUCE
D'ACTIVATION

5 env.
sec.

Pour la
détermination
de la glycémie

Utilisable en
autocontrôle

Seulement pour
Accu-Chek® Active



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, 1686
South Africa
Tel: +27 (11) 504 4600
www.accu-chek.co.za

CE 0088

IVD


+2 °C +30 °C



أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار

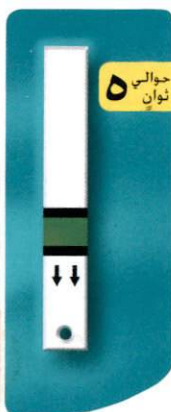

١ شريحة التفعيل

لقياس مستوى
السكر في الدم

مناسب للفحص
الذاتي

يستعمل فقط مع
أكيو-تشيك أكتيف



5
1031912/6061466
FG0010273-068

GD2 350 IV



REF 07124155019



4 015630 064144

صنع في ألمانيا / Made in Germany

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



07126352001(03)
044x044x080 E

EN
Replace cap immediately.
Always store strips in container.
Suitable for self-testing.

ES
Tape de inmediato después de utilizar.
Guarde siempre las tiras en el envase.
Apto para el autocontrol.

CZ
Po otevření ihned uzavřete.
Uchovávejte v originálním obalu.
Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11



PT
- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR
- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU
- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE
- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT
- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO
- Închideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR
- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi Kendine test için uygundur.
- Kullanılmamalıdır. Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



Σ 25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-44h&5th, 16, Deogyeong-daem 1550beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA.
Manufacturing site
74, Gwangju-gu 4-ro, Gwang-yeop,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com



Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-46386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

NEW


OPEN
HERE

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodeFreeTM

Blood Glucose Test Strip

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodeFreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**

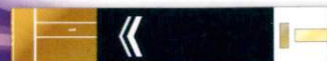

SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT NO.: 80319054
MFG DATE: 2019. 03. 28
EXP DATE: 2021. 03. 27

INSTRUCTIONS FOR USE:

1.
Twist
Cap



2.
Pull
Cap



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

Do not use if safety seal has been broken.

CE 0123



STERILE R



Twist Lancet

- Universal design fits almost all lancing device
- Single use only

200 Sterile Lancets



30G



Shanghai Carelife International Trading Co.,Ltd.
1707 Yinqiao Bldg.,58 Jinxin Rd. 201206 Shanghai, CHINA
Tel:0086 21 58542656



Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Eiffestraße 80,20537 Hamburg,GERMANY



180128T



2023-01-27



6 951568 002712 >

Made in China